


ComfortGel SE

Stretcher Matratze

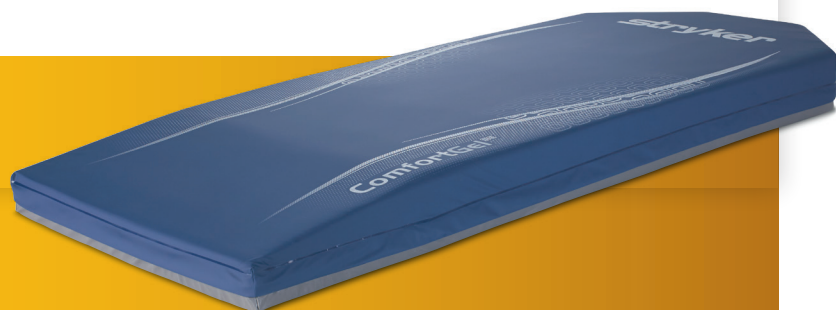

Die ComfortGel SE trägt durch einen höheren Komfort und die Druckumverteilung zur **Verbesserung der Patientenergebnisse** bei.¹


Ein neuer Standard bei Stretcher Matratzen

Bei der Entwicklung der Stretcher Matratzen der SE Serie haben wir uns darauf konzentriert, unser Design mit Hinblick auf die proaktive Prävention zu optimieren.

ComfortGel SE wurde mit Hinblick auf die gesamte Patientenerfahrung entworfen. Ihre speziellen Merkmale tragen dazu bei, dass der Druck umverteilt und der Patientenkomfort erhöht wird.


Hauptmerkmale

- Unterstützt die Behandlung und Prävention von Druckgeschwüren¹
- Das Gel-Design sorgt für Memory-Wirkung und Haltbarkeit
- Leicht abfallendes Fußende zur Verminderung des auf die Ferse des Patienten einwirkenden Drucks
- Das rutschfeste Material an der Unterseite macht Klettverschlüsse überflüssig
- Der dreiseitige Reißverschluss ermöglicht dem Pflegepersonal eine gründlichere Überprüfung des Zustands der inneren Bestandteile

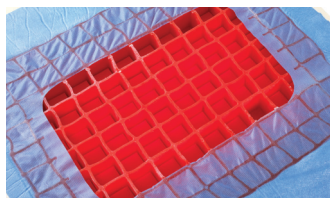

CoreGel-Technologie

CoreGel bildet im Kreuzbeinbereich eine Mulde, die einem Verrutschen des Patienten entgegenwirkt.² Die Konstruktion trägt zur Aufnahme und Verteilung des Gewichts bei und unterstützt so die Druckumverteilung.

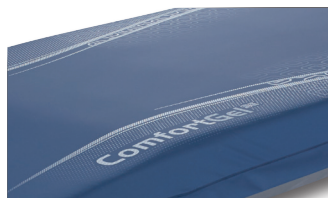


Bezug

Der ComfortGel SE-Auflagenbezug verfügt über eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit, hochfrequenz verschweißte Nähte und einen dreiseitigen Reißverschluss für eine bessere Sichtbarkeit bei der Inspektion der inneren Komponenten.



Geschweißte Nähte

Wir wissen, dass die Nähte von Auflagen häufig ein Problemereich für Infektionen sind. Daher werden unsere Bezüge mit einem speziellen Hochfrequenz-Schweißverfahren versiegelt, bei dem ein elektromagnetisches Verkleben dazu dient, ein Eindringen und Infiltrieren von Flüssigkeit zu begrenzen.

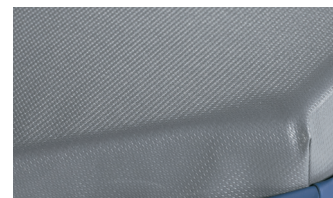

Rutschfeste Unterseite

Die Unterseite der ComfortGel SE besteht aus einem rutschfesten Material. So ist der Halt der Matratze bei der Bewegung und Umbettung des Patienten gewährleistet. Durch den Verzicht auf Klettverschlüsse wird die Prävention von Infektionen verbessert.

ComfortGel SE

Stretcher Matratze



Serienausstattung

- CoreGel-Technologie
- Bezug aus Polycarbonat-Polyurethan
- Geschweißte Nähte
- Leicht abfallendes Fußende
- Dreiseitiger Reißverschluss
- Rutschfeste Unterseite

Technische Daten

Modellnummer	1805
Gesamtbreite	66 cm, 76 cm
Gesamtlänge	193 cm
Höhe	14 cm
Tragfähigkeit	317 kg
Flammwidriger Innenbezug*	Ja

*Erfüllt Flammenschutznormen: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Methode 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Clause 9; BFD IX-11; UNI9175

Stryker behält sich vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Herstellergarantie

Stryker Medical, ein Geschäftsbereich der Stryker Corporation („Stryker“), garantiert, dass das Produkt ComfortGel Auflage, Modell 1805, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie von Stryker deckt dabei nur die folgenden Komponenten bei normaler Nutzung ab:

- Interne Bestandteile: drei (3) Jahre
- Flammbariere: ein (1) Jahr
- Auflagenbezug: ein (1) Jahr

1. Empfohlen zur Anwendung in Kombination mit klinischer Evaluierung der Risikofaktoren und Beurteilung der Haut durch eine medizinische Fachkraft.

2. Ist vorzugsweise in Kombination mit einer Fahrtrage anzuwenden, die mit der LiftAssist-Rückenlehne ausgestattet ist.

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Dem behandelnden Arzt obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett bzw. die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: ComfortGel SE, CoreGel, ShearGel, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die oben aufgeführten Produkte sind mit der CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Richtlinie über Medizinprodukte (MDD European Medical Device Directive) versehen. Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU vorgesehen.

Dieses Produkt ist mit der Intelli-Gel® Hohlgeritterkonfiguration ausgestattet. „Intelli-Gel®“ in Lizenz von EdIZONE, LLC of Alpine, UT, USA.



1362DE Rev B.0
DFS 01/2017
2016-12237.

Copyright © 2017 Stryker
www.stryker.com