

# Prime TC Transportstuhl




## Patiententransport neu definiert.

Bei den Erfahrungen, die Patienten machen, kommt es aufs Detail an. Daher sind alle Aspekte des Prime TC Transportstuhls ganz darauf ausgelegt, eine freundliche und sichere Umgebung für Pflegende, Patienten und ihre Familienangehörigen zu schaffen. Eindeutige Bedienelemente sorgen für eine intuitive Bedienung durch alle Benutzer. In das Design ist rückschonende BackSmart Ergonomie eingeflossen, um Verletzungen von Pflegenden durch Bück- und Greifbewegungen möglichst zu reduzieren. Der nicht klappbare, starre Rahmen sorgt für Dauerhaftigkeit und senkt zugleich die Diebstahlwahrscheinlichkeit. Investitionen in das Wohlergehen von Patienten und den Komfort von Pflegenden sind wichtig.



Hochklappbare Fußstützen reduzieren Stolperfallen und machen den Weg beim Hinsetzen und Aufstehen frei. Die fußbetätigte Rückklappfunktion erlaubt einen besseren Zugang zum Patienten. Zudem kann der Stuhl näher an Betten, Fahrzeuge oder Tische herangeschoben werden.

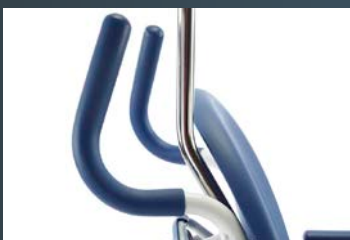

Rückschonende BackSmart-Schiebegriffe verbessern die Sicherheit der Pflegenden, da diese ihre Ellbogen in einem ergonomischen 90°-Winkel halten können. Sie sind für Pflegende praktisch jeder Körpergröße geeignet.



Optionale Beinstützen sind fest montiert und lassen sich in einer bequemen Höhe fest vertikal arretieren. Sie werden einfach weggeklappt, wenn sie nicht gebraucht werden.

Das Kopfteil des Infusionsstativs und die Schale der Rückenlehne können zur Kennzeichnung **in mehreren Farboptionen** geliefert werden.



Die Manövrierfähigkeit der großen **Big Wheel-Räder** sorgt dafür, dass der Stuhl leicht gelenkt und um die Ecke gefahren werden kann.

**Die One-Touch-Zentralbremse** verbessert die Effizienz der Pflegenden und minimiert gleichzeitig Bück- und Greifbewegungen.

**Die Stehhilfeposition der Armstützen** hat einen erhöhten und verlängerten Kontaktbereich für das Setzen und Aufstehen der Patienten.

**Der nicht klappbare Rahmen** beugt Diebstählen vor. Die Stühle können jedoch ineinandergeschoben werden, um Platz zu sparen.

Der Rahmen des Stuhls ist **ganz auf die einfache Reinigung ausgelegt** und besteht aus nahtlosen Komponenten, die einfach zu reinigen sind und mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen werden können.\*

**Gelbe Aktivierungspunkte** sorgen für eine intuitive Bedienung durch alle Benutzer.

**Bewegliche, aber nicht abnehmbare Komponenten** reduzieren das Risiko, dass Teile verloren gehen oder gestohlen werden.

**Das sichere Arbeitsgewicht von ca. 227 kg** ist auch für schwerere Patienten geeignet.

**Das widerstandsfähige Infusionsstativ** ist für den Rostschutz verchromt. Die Haken sind aus Sicherheitsgründen verkapselt.

**Die aufrechte Sauerstofftankhalterung** minimiert Bücken und Heben, um einen schweren Sauerstofftank unter dem Stuhl zu platzieren.

\* Stühle mit optionaler Sitzpolsterung sind nicht mit Hochdruckreiniger waschbar.

# Prime TC Transportstuhl



## Standardausstattung

- Armstützen mit Stehhilfe
- Hochklappbare Fußstützen mit Rückklappfunktion
- BackSmart-Schiebegriffe
- One-Touch-Zentralbremse
- Kippschutzräder
- Dokumentenhalter
- Kunststoffformteile, nahtloses Design
- Per Hochdruckreiniger waschbar\*
- Nicht klappbarer, pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Design zum Ineinanderschieben
- Gelbe Aktivierungspunkte
- Big Wheel-Manövrierfähigkeit
- Keine abnehmbaren Teile

## Optionale Ausstattung

- Beinstützen
- Aufrechte Sauerstofftankhalterung
- Verchromtes Infusionsstativ mit 1-Zoll-Rohr
- Kopfteil für Infusionsstativ in sechs Farboptionen
- Haken für Urinbeutel
- Sitzpolsterung\*
- Beckengurt

\*Stühle mit optionaler Sitzpolsterung sind nicht mit Hochdruckreiniger waschbar.

## Technische Daten

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Modellnummer                      | 1460          |
| Gesamtlänge                       | 102,1 cm      |
| Gesamtbreite                      | 71,8 cm       |
| Sitzbreite                        | 54,6 cm       |
| Sitzhöhe                          |               |
| Ab Fußstütze                      | 38,1 cm       |
| Ab Boden                          | 53,3 cm       |
| Stuhlhöhe                         |               |
| Mit Infusionsstativ               | 185,4 cm      |
| Ohne Infusionsstativ              | 114,3 cm      |
| Verstellbereich der Schiebegriffe |               |
| Breite                            | 40,6–52,1 cm  |
| Höhe über dem Boden               | 88,9–114,3 cm |
| Gewichtskapazität                 | 226,8 kg      |

## Herstellergarantie

Drei Jahre Garantie für Teile, ein Jahr Garantie für Arbeits- und Fahrtkosten

## Medical

**Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.**

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Prime TC und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen



80707DEC2012DE Rev C.3  
DLS 03/2018  
2017-16174

Copyright © 2018 Stryker  
stryker.com