

stryker

SV2

Krankenhausbett

Individuell an Ihren Bedarf anpassbar



Vielseitigkeit ist seine Stärke

Bei Stryker entsteht ein Krankenhausbett wie das SV2 durch Kooperation. In Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften wie Ihnen auf der ganzen Welt haben wir ein hochwertiges Bett entwickelt, das Sie an Ihren individuellen Bedarf anpassen können.



Abnehmbares Kopfteil


Ermöglicht eine ergonomischere Handhabung durch die Pflegekräfte in jeder Bettposition, wovon auch der Patient profitiert.

Integrierte Bedienfelder

Die intuitiven Bedienelemente geben den Pflegekräften und dem Patienten in jeder Bettposition Zugriff auf praktische Funktionen.

Doppelte Verschiebung

Die Rückenlehne kann um 89 mm, die Knieleiterhöhung um 39 mm verschoben werden, um den Druck am Kreuzbein zu mindern und das Verrutschen des Patienten zu verringern.

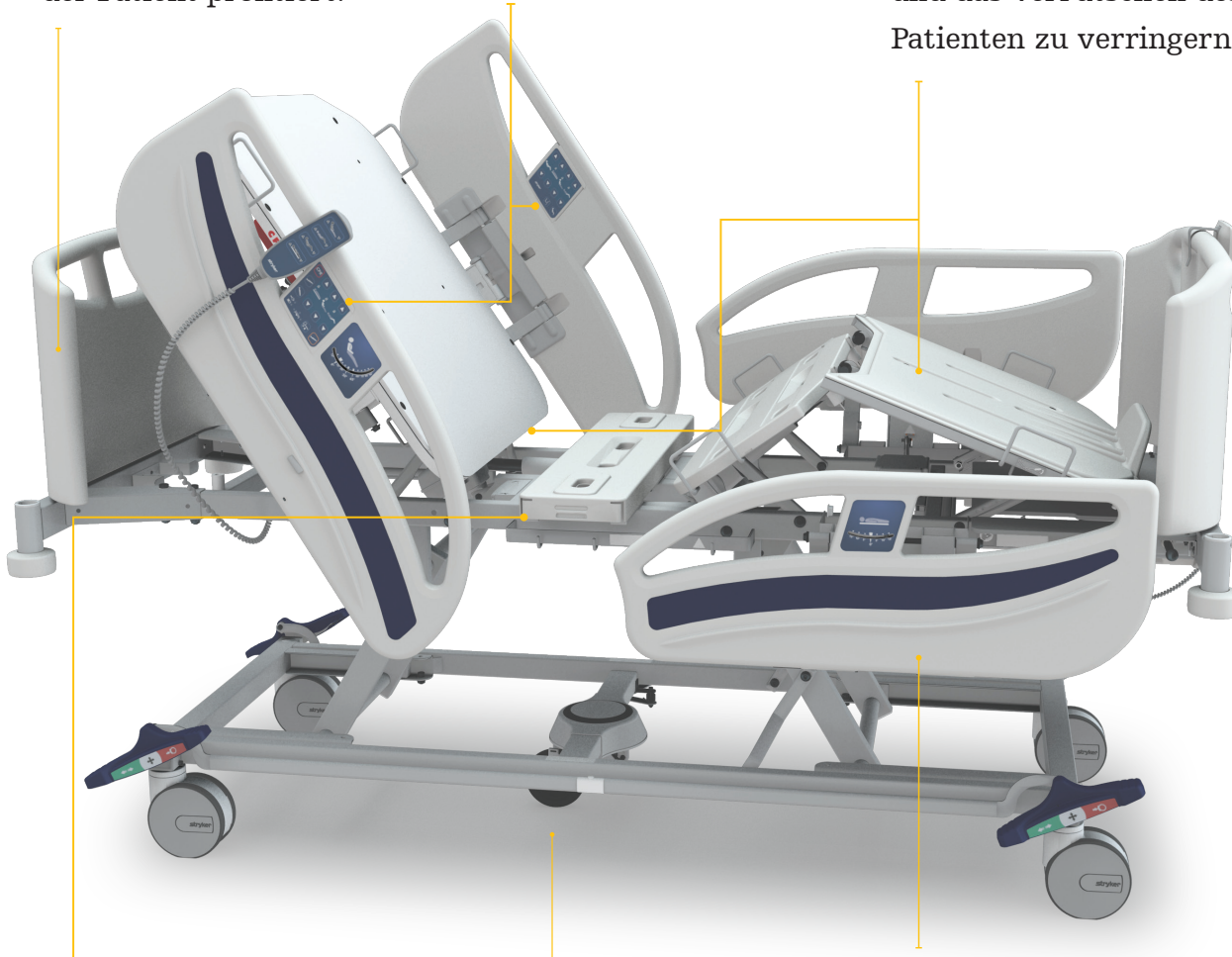

Dauerhafte Unterbettbeleuchtung

Macht das Umfeld für den Patienten in der Nacht beim Verlassen des Betts besser sichtbar, sodass Stürzen vorgebeugt wird.

5. Rad

Durch das 5. Rad lässt sich das Bett leichter und somit für das Pflegepersonal rückenschonender manövrieren. Das 5. Rad verbessert den Geradeauslauf und erleichtert die Mobilität in engen Räumen.

Herunterklappbare Seitengitter

Der Patient kann das Bett leichter verlassen, Gefahrenstellen, an denen sich der Patient verfangen kann, sind minimiert und vollständig abgedeckt und Pflegekräfte können die Seitengitter einfach mit einer Hand herunterklappen.



Bis 250 kg belastbar



10 Jahre Lebensdauer



IEC 60601-1-2:2014



Anzeige für niedrige Höhe

Das SV2 Krankenhausbett vereint Form und Funktion erfolgreich, sodass die Patienten von besserem Wohlbefinden und Komfort profitieren und das Pflegepersonal effizient arbeiten kann. Dabei steht die Sicherheit von Patient und Pflegenden stets im Vordergrund:



Anzeige für niedrige Höhe

Diese zeigt deutlich an, wenn sich das Bett in der niedrigsten Position befindet, um das Sturzverletzungsrisiko für den Patienten zu minimieren. Nachts kann das Pflegepersonal die Position der Betten auf einen Blick erkennen und sicherstellen, dass sich alle in der niedrigsten Position befinden.

Ausstiegposition

Wir wollen Stürze der Patienten verhindern. Dank der cleveren Ausstiegposition kann die Rückenlehne ganz einfach in die für den Patienten geeignete Ausstiegposition gebracht werden. Der Patient kann sich beim Aufstehen am Seitengitter festhalten.



Sicherheitsseitengitter

Die Patientensicherheit steht für uns an erster Stelle. Die herunterklappbaren Seitengitter des SV2 erleichtern dem Patienten das Aufstehen und bieten Sicherheit, indem sie die Liegefläche vollständig abdecken. Die Seitengitter lassen sich einzeln mit nur einer Hand absenken. Das Design minimiert Gefahrenstellen, an denen sich der Patient sich verfangen kann, und gestattet eine einfache und gründliche Reinigung.

Integrierte Bedienfelder an den Seitengittern

Das SV2 ist mit zwei Bedienfeldern an den Seitengittern ausgestattet, sodass Patient und Pflegende das Bett unkompliziert bedienen können. Das nach außen zeigende Schwestern-Bedienfeld ermöglicht dem Pflegepersonal die Sperrung des Patienten-Bedienfelds und gibt Zugriff auf die elektronische HLW-Funktion für Notfälle.



Patienten-Bedieneinheit

Der Patient soll es so bequem wie möglich haben. Über die Patienten-Bedieneinheit kann er die Bettposition einfach an seine Bedürfnisse anpassen.

Schwestern-Bedieneinheit

Das medizinische und pflegerische Personal muss den Patienten von allen Seiten des Betts aus erreichen können, um ihn wie erforderlich versorgen zu können.

Die Schwestern-Bedieneinheit ermöglicht die Steuerung des Betts von verschiedenen Stellen aus und bietet Zugriff auf eine elektronische HLW-Funktion sowie Trendelenburg-, Anti-Trendelenburg- und Untersuchungsposition.



Dank Ein-Tasten-Bedienung können Patient und Pflegepersonal die Bettposition einfach und ohne körperliche Anstrengung einstellen. Vom ergonomischen Design profitieren Patienten und Pflegende gleichermaßen.

Vielseitig. Für alle Phasen des Krankenhausaufenthalts.



Bei der Entwicklung des SV2 Krankenhausbetts wurde auf Effizienz und Sicherheit bei verschiedensten Einsatzbedingungen geachtet. Das vielseitige Bett ist umfassend einstellbar, um den Pflegenden die Arbeit zu erleichtern und den Komfort des Patienten zu verbessern.

Dank des großen Höheneinstellbereichs von 37 bis 75 cm kann das Bett auf Bodennähe abgesenkt werden, um Patientenstürze zu vermeiden, oder auf eine ergonomische Arbeitshöhe für die Pflegekräfte.

Große Patienten profitieren von einer Bettverlängerung, die das Bett 31 cm länger macht. Die Wäscheablage ist eine

integrierte Ablagefläche am Fußteil, die für Patientenkleidung, Bettwäsche oder die Schwestern-Bedieneinheit genutzt werden kann.

Das 5. Rad erleichtert das Lenken und Drehen des Betts, sodass Rückenverletzungen der Pflegenden vorgebeugt wird und das Manövrieren auf engem Raum leichter fällt.



Das abnehmbare Kopfteil ermöglicht eine ergonomischere Arbeitshaltung für die Pflegekräfte. Kopf- und Fußteil sind leicht abnehmbar, um schnellen Zugang zum Patienten zu ermöglichen.

Ein HLW-Entriegelungshebel befindet sich jeweils links und rechts hinten an der Rückenlehne. Die Hebel sind sowohl bei angehobenen als auch bei abgesenkten Seitengittern problemlos zugänglich.

Die Betätigung der HLW-Entriegelung bringt die Liegefläche in einen Winkel von 0°, wie er für eine effektive HLW erforderlich ist.

Die dauerhaft eingeschaltete Unterbettbeleuchtung macht das Umfeld für den Patienten beim Verlassen des Betts in der Nacht besser erkennbar, sodass Stürzen vorgebeugt wird.



Bis 250 kg belastbar



Bettverlängerung 31 cm



Höheneinstellung 37 bis 75 cm

Die medizinische Versorgung sollte an die Bedürfnisse von Patienten, Angehörigen und Pflegekräften angepasst sein. Deshalb bietet Stryker eine große Auswahl an Produkten und Dienstleistungen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden sowohl der Patienten als auch der Pflegenden zugutekommen.

SV2 Custom

Das SV2 ist ein Bett mit großem Funktionsumfang, zu dem standardmäßig unter anderem eine Anzeige für die niedrigste Position, zwei Seitengitterbedienfelder und praktische Ein-Tasten-Bedienung zählen. Das SV2 Custom lässt sich durch optionale Funktionen ergänzen.

1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 (Option zur Auswahl mehrerer Funktionen)



SV2 Plus Paket

Wir legen Wert darauf, Ihnen ein Bett anzubieten, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Neben dem SV2 Custom bieten wir zwei Zusatzpakete, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Im Plus Paket sind alle Standardfunktionen sowie Zwillingsrollen, ein fünftes Rad und die Schwestern-Bedieneinheit enthalten.

Enthaltene Optionen: 1, 2 und 5



SV2 Complete Paket


Das SV2 Complete ist unser komplett ausgestattetes Modell, das alle verfügbaren Optionen umfasst und so allen Bedürfnissen gerecht wird.

Enthaltene Optionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7



Die Optionen

- | | |
|--|--|
| 1 5. Rad | 5 Zwillingsrollen |
| 2 Schwestern-Bedieneinheit | 6 Unterbettbeleuchtung |
| 3 Patienten-Bedieneinheit | 7 Röntgendurchlässige Rückenlehne mit Kassettenhalter |
| 4 Bettverlängerung mit Wäscheablage | |

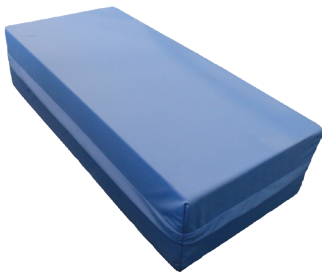

Polster für Bettverlängerung

Polster 12 cm

(T) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 18 cm

Nettogewicht: 1,4 kg

Polster 14 cm

(T) 33 cm x (B) 71 cm x (H) 20 cm

Nettogewicht: 1,6 kg



Infusionsstativ aus Edelstahl

Höhe einstellbar

Tragfähigkeit:

2 kg je Haken

Breite: 42 cm

Höhe:

107–176 cm



Bettgalgen

+ Triangelgriff

Tragfähigkeit:

75 kg

Breite: 81 cm

Höhe:

150 cm



gerades Infusionsstativ


Höhe einstellbar

Tragfähigkeit:

2 kg je Haken

Höhe:

116,7–178 cm

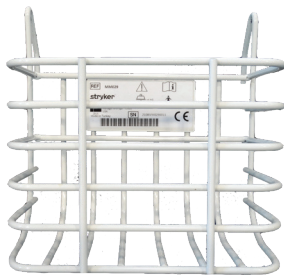

Haken für Urinbeutel

203 mm x 198 mm x

139 mm [B x H x T]



Sauerstoffflaschenhalter

275 mm x 390 mm x

145 mm [B x H T]

Bettfarben



Stryker Blau:
Pantone 534C



Grauweiß:
RAL 9002



Seidengrau:
RAL 7044



Pastellblau:
RAL 5024




Signalgelb:
RAL 1003


Holz



Kirsche

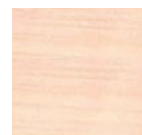

Ahorn

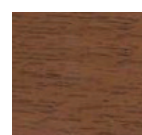

Walnuss

Konform mit internationale Normen für Betten

- IEC 60601-1 Ed. 3.1:2012
- IEC 60101-1- 6 Ed. 3.1: 2013
- IEC 62366 Ed. 1.1:2014
- IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015
- IEC 60601-2-54 Ed. 1.1: 2015
- IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4.0


Die Auflagen aus der SV Reihe sorgen für optimalen Komfort des Patienten während seines Krankenhausaufenthalts. Sie sind darauf ausgelegt, die Dekubitusprophylaxe und -behandlung zu unterstützen.

Auflagen aus Schaumstoff

Auflage	Größe	Brandschutzoptionen
12 cm, Standardschaum	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
14 cm, Standardschaum	200 x 86 x 14	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

Eigenschaften

- Haltbare und kostengünstige Patientenauflage
- Anpassbar an die meisten Bettgestelle
- Drehbar
- Fester Schaum mit uniformer Dichte
- Passt sich an alle Bettpositionen an

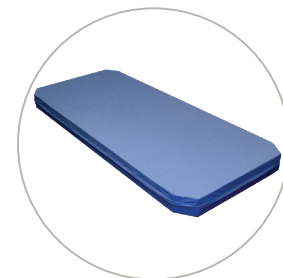

Schaumstoffauflage


Auflagen aus Memory Foam

Die Auflage aus Memory Foam passt sich an die Körperform des Patienten an, verteilt das Gewicht gleichmäßig und legt sich in jeder Position an die Körperkontur an, was den Komfort und die Druckumverteilung verbessert.

Auflage	Größe	Brandschutzoptionen
12 cm, Memory Foam	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 • BS7177

Eigenschaften

- Reagiert auf Temperatur
- Verringert Druck an den Kontaktflächen
- Wasserdichter Bezug
- Passt sich an die Körperform an
- In mehrere Richtungen dehnbarer Bezug
- Dampfdurchlässig

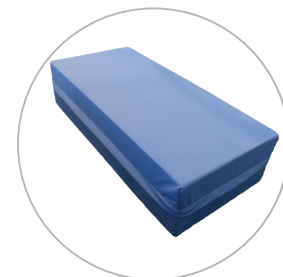

Polsterauflage



Memory-Foam-Auflage

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen sind bei Stryker der Garant für Kundenzufriedenheit. Unsere ProCare Servicelösungen bieten Service und Support auf höchstem Standard gemäß den Anforderungen Ihrer Einrichtung.

ProCare Services

Mit den ProCare Services helfen Ihnen unsere hochspezialisierten Techniker sicherzustellen, dass Ihre Ausstattung jederzeit einsatzbereit ist. ProCare ist eine Partnerschaft, auf die Sie sich verlassen können und die Ihnen eine Sorge abnimmt: so können Sie sicher sein, dass Sie für Ihre Ärzte, Ihr Personal und die Patienten alles Machbare tun.



Flex Financial


Unsere Flex Financial Finanzierungsprogramme bieten Ihnen eine Reihe cleverer Alternativen für den Bedarf Ihrer Einrichtung. Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Finanzierungslösung.

Der entscheidende Unterschied. Zur Schonung der Umwelt.

Für uns ist das Wohlergehen unseres Planeten so wichtig wie die Gesundheit der Menschen, die auf ihm leben.



Wiederverwertung von gefährlichen und ungefährlichen Abfällen in unserer Anlage

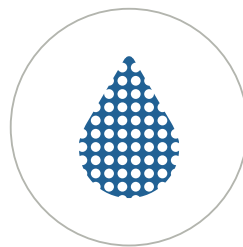

Einsatz von umweltfreundlichen Lacken



Konform mit ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem

* Verfügbarkeit des Programms je nach Land und Produktportfolio unterschiedlich. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebsmitarbeiter.

Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker, SV2. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



OTHMED-BRO-60_16251DE Rev. 1
SDL 08/2020
2017-16251

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com