

stryker

SV2

Letto ospedaliero

Personalizzabile per tutte le esigenze



La versatilità, la sua più importante caratteristica.

Per noi di Stryker, la collaborazione è un aspetto fondamentale per realizzare un letto ospedaliero come SV2. Lavorando insieme a medici e operatori sanitari di tutto il mondo, siamo in grado di offrire un letto di alta qualità che può essere adattato a qualsiasi esigenza specifica.



Testiera mobile


Consente una posizione più ergonomica all'operatore e offre al paziente maggiori vantaggi in tutte le posizioni del letto.

Pulsantiera integrate

Le pulsantiere intuitive offrono un'ottima funzionalità sia all'operatore che al paziente in tutte le posizioni del letto.

Doppia regressione

Consente una regressione di 89 mm dello schienale e una regressione di 39 mm del femorale in modo da ridurre la pressione sacrale e lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto.

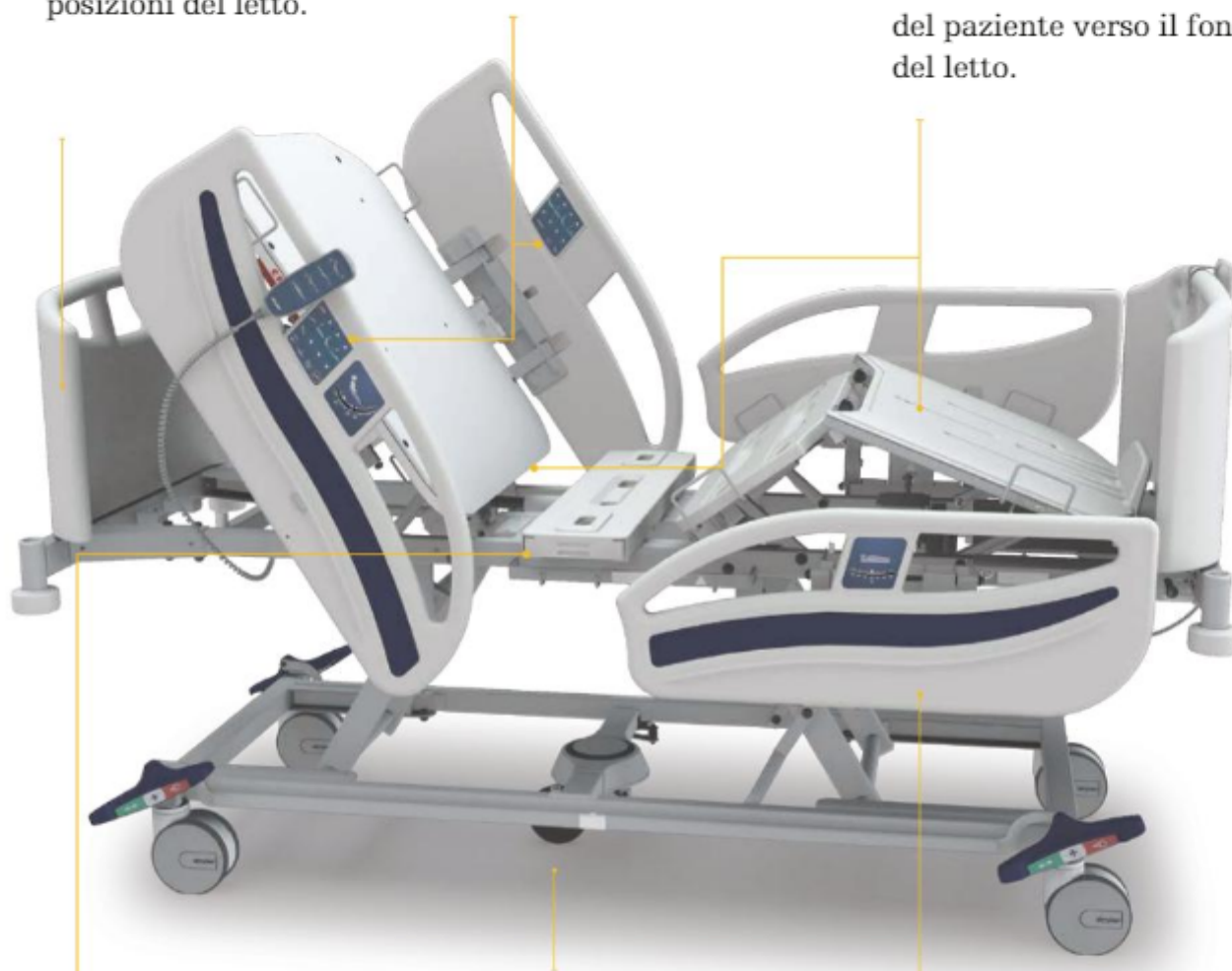**Luce sotto il letto "sempre accesa"**

Offre al paziente una migliore visibilità del pavimento, in caso di uscita notturna dal letto, contribuendo a ridurre le cadute.

Quinta ruota

La mobilità con quinta ruota migliora la manovrabilità del letto, permettendo di ridurre le lesioni lombari ai danni degli operatori. La quinta ruota consente al letto di muoversi più agilmente in un percorso rettilineo e facilita la sua mobilità negli spazi più ristretti.

Sponde laterali a scomparsa

Semplificano l'uscita del paziente e ne aumentano la sicurezza, proteggendolo lungo l'intera lunghezza del letto e riducendo al minimo gli spazi di intrappolamento. Le sponde sono facilmente utilizzabili dagli operatori, che possono abbassarle con una sola mano.



Carico operativo di sicurezza 250 kg



Vita utile prevista di 10 anni



IEC 60601-1-2:2014



Indicatore altezza minima

Il letto ospedaliero SV2 coniuga con successo design e funzionalità, aumentando il benessere e il comfort dei pazienti e permettendo al contempo agli operatori di lavorare con la massima efficienza. La sicurezza di paziente e operatore è sempre in prima linea.



Indicatore altezza minima

L'indicatore altezza minima indica con chiarezza quando il letto si trova nella posizione più bassa possibile, riducendo così le lesioni che il paziente può subire in seguito a eventuali cadute. Durante la notte, gli operatori possono avere una chiara visione d'insieme di tutti i letti e verificare che tutti siano posizionati all'altezza minima.

Uscita intelligente

Il nostro obiettivo è prevenire la caduta del paziente dal letto. La funzione di uscita intelligente solleva lo schienale e porta il materasso all'altezza che consente la discesa del paziente in tutta comodità, con il sostegno della sponda laterale di sicurezza.



Sponde laterali di sicurezza

La sicurezza del paziente è la nostra priorità. Le sponde laterali a scomparsa del letto ospedaliero SV2 agevolano la discesa del paziente e ne aumentano la sicurezza, proteggendo per intero tutta la base del materasso. Le sponde laterali possono essere abbassate individualmente usando una sola mano. Il loro design riduce al minimo gli spazi di intrappolamento e permette una pulizia facile e accurata.

Pulsantiere laterali integrate

Il letto ospedaliero SV2 è dotato di due pulsantiere situate sulle sponde laterali che permettono tanto al paziente quanto all'operatore di manovrare facilmente il letto. L'unità rivolta verso l'esterno consente agli operatori di bloccare la pulsantiera del paziente e di utilizzare la funzione CPR elettronica in caso di emergenza.



Quadro comandi per il personale infermieristico

Gli operatori necessitano la massima flessibilità durante i loro spostamenti intorno al letto per prestare ai pazienti l'assistenza di cui hanno bisogno. Il quadro comandi per il personale infermieristico consente di regolare il letto da varie posizioni. Grazie alla possibilità di attivare la funzione CPR elettronica, la posizione Trendelenburg, anti-Trendelenburg e la posizione visita, si può prestare assistenza ai pazienti da varie posizioni.

Telecomando paziente

Ogni paziente ha la possibilità di trovare la posizione che gli è più comoda. Grazie all'apposito telecomando, il paziente può regolare facilmente la posizione del letto in base alle sue esigenze.



Le pulsantiere permettono a pazienti e operatori di regolare facilmente la posizione del letto tramite un solo tasto, eliminando così la necessità di fare sforzi fisici. Sono progettate con un design ergonomico per pazienti e operatori.

Versatile. Durante tutta la degenza.



Il letto ospedaliero SV2 è costruito per offrire la massima versatilità in tutti gli ospedali, tenendo conto delle esigenze relative all'efficienza e alla sicurezza. È completamente regolabile per garantire sia la facilità d'uso da parte dell'operatore che il comfort del paziente.

Grazie alla sua altezza regolabile da 37 a 75 cm, è possibile abbassare il letto avvicinandolo al pavimento, prevenendo così eventuali cadute del paziente e rendendo più ergonomica la postura dell'operatore.

Per i pazienti più alti è possibile estendere il letto, aumentandone così la lunghezza di ulteriori 31 cm. Il vassoio portabiancheria

è un'unità integrata situata a livello della pediera, in cui è possibile riporre i vestiti e la biancheria del paziente o il quadro comandi per il personale infermieristico.

La quinta ruota facilita la manovrabilità e la rotazione del letto, riducendo le lesioni lombari ai danni degli operatori, ed è particolarmente utile negli spazi più ristretti.



La testiera mobile permette agli operatori di assumere una postura più ergonomica. La testiera e la pediera sono facilmente removibili, permettendo all'operatore di accedere con facilità al paziente.

Le leve CPR sono posizionate su entrambi i lati dello schienale e sono facilmente accessibili con le sponde laterali alzate o abbassate.

Attivando l'abbassamento istantaneo della funzione CPR, il letto raggiunge un angolo di 0°, indispensabile per eseguire una CPR efficace.

La luce sotto il letto sempre accesa aumenta la visibilità del paziente al momento di scendere dal letto, durante la notte, aiutandolo a prevenire eventuali cadute.



Carico operativo di sicurezza
250 kg



Estensione letto 31 cm



Regolazione altezza
37 – 75 cm

Personalizzabile. Per tutte le esigenze.

L'assistenza sanitaria deve essere personalizzata per andare incontro alle esigenze di pazienti, famiglie e operatori. È per questo che Stryker offre un ampio assortimento di prodotti e servizi che servono a migliorare la salute e il benessere tanto dei pazienti quanto degli operatori.

Letto ospedaliero SV2 personalizzabile

Ricco di accessori e di grande valore, il letto ospedaliero SV2 comprende caratteristiche standard come l'indicatore altezza minima, la doppia pulsantiera sulle sponde laterali e i comandi elettronici di facile utilizzo. Il letto ospedaliero SV2 è inoltre personalizzabile con l'aggiunta di accessori optional.

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (possibilità di scegliere accessori diversi)



Pacchetto SV2 Plus

Per noi è importante offrire un letto adatto alle esigenze dei nostri clienti. Oltre al letto ospedaliero SV2 personalizzabile, offriamo anche due pacchetti supplementari che facilitano le attività decisionali degli operatori. Il pacchetto Plus prevede tutti gli accessori standard oltre alle ruote doppie, la quinta ruota e il quadro comandi per il personale infermieristico

Accessori compresi: 1, 2 e 5



Pacchetto SV2 completo

Il pacchetto SV2 completo è il nostro modello dotato di tutti gli accessori e di tutte le soluzioni per venire incontro alle vostre esigenze.

Accessori compresi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7



Tutti gli accessori

- | | |
|---|---|
| 1 Quinta ruota | 5 Ruote doppie |
| 2 Quadro comandi per il personale infermieristico | 6 Luce sotto il letto |
| 3 Telecomando paziente | 7 Schienale radiotrasparente con portacassette |
| 4 Estensione del letto con vassoio portabiancheria | |



Materasso imbottito per estensione letto

Materassino imbottito 12 cm
(prof.) 33 cm x (larg.) 71cm x (alt.) 18 cm
Peso netto: 1,4 kg

Materassino imbottito 14 cm
(prof.) 33 cm x (larg.) 71cm x (alt.) 20 cm
Peso netto: 1,6 kg



Asta portaflebo in acciaio inox

Altezza regolabile
Capacità di carico:
2 kg per gancio
Larghezza: 42 cm
Altezza: 107 cm – 176 cm



Asta solleva pazienti

+ trapezio
Capacità di carico: 75 kg
Larghezza: 81 cm
Altezza: 150 cm



Cesta per sacche catetere

203 mm x 198 mm x
139 mm [larg. x alt. x
prof.]



Porta-bombola di ossigeno

275 mm x 390 mm x
145 mm [larg. x alt. x
prof.]

Colori letto



Blu Stryker:
Pantone 534C



Bianco:
(RAL 9002)



Grigio seta:
(RAL 7044)



Blu pastello:
(RAL 5024)



Giallo segnale:
(RAL 1003)

3 modelli in legno



Legno



Acero



Noce

Conforme alle norme internazionali relative ai letti

- IEC 60601-1 edizione 3.1: 2012
- IEC 60101-1 edizione 3.1: 2013
- IEC 62366 edizione 1.1:2014
- IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015
- IEC 60601-2-54 edizione 1.1: 2015
- IEC 60601-1-2:2014 edizione 4.0

La serie di materassi SV è progettata per il comfort dei pazienti durante tutta la degenza. I materassi SV sono pensati per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito.

Materassi in schiuma

Modello materasso	Misura	Caratteristiche ignifughe
Schiuma standard 12 cm	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175
Schiuma standard 14 cm	200 x 86 x 14	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175

Proprietà

- Materassi resistenti ed economicamente vantaggiosi
- Adattabili alla maggior parte dei telai
- Capovolgibili
- Schiuma monodensa ad alta elasticità
- Adatti a tutte le posizioni del letto

Materassi in schiuma viscoelastica

Il materasso in schiuma viscoelastica si modella in base alla forma del paziente, distribuisce in modo uniforme il suo peso e si adatta al suo corpo in qualunque posizione, aumentando il comfort e la redistribuzione della pressione.


Modello materasso	Misura	Caratteristiche ignifughe
Schiuma viscoelastica 12 cm	200 x 86 x 12	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • EN597-1, EN597-2, BS6807, UNI9175 • BS7177

Proprietà

- Sensibile alla temperatura
- Riduce la pressione all'interfaccia
- Coprimaterasso impermeabile
- Si adatta alla forma del corpo
- Coprimaterasso elastico in entrambe le direzioni
- Permeabile ai vapori



Materasso in schiuma

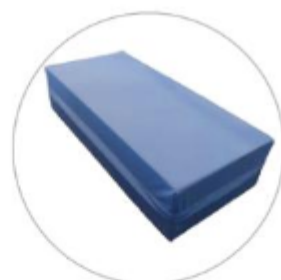

Materasso imbottito



Materasso in schiuma viscoelastica

L'alta qualità dei nostri prodotti e servizi rientra nell'impegno di Stryker di soddisfare i nostri clienti. La nostra soluzione ProCare offre le massime garanzie in termini di servizi e di assistenza per le esigenze di tutte le strutture.

Servizi ProCare

Grazie al servizio di assistenza ProCare, i nostri tecnici specializzati sono pronti a rispondere a tutte le necessità. ProCare è una collaborazione su cui poter contare: un motivo di preoccupazione in meno, con in più la certezza di aver fatto tutto il possibile per il personale e per i pazienti.



Grazie ai programmi di finanziamento Flex di Stryker, offriamo un assortimento di alternative intelligenti pensate per le esigenze di tutte le organizzazioni. Collaboriamo con i nostri clienti prestando loro assistenza nella ricerca delle soluzioni finanziarie più adatte alle loro esigenze*.

Flex Financial

Fare la differenza. Per ridurre il nostro impatto ambientale.

Per Stryker, il benessere del nostro pianeta conta quanto la salute dei suoi abitanti.



Le nostre strutture riciclano tanto i rifiuti pericolosi quanto i rifiuti non nocivi.



Uso di sostanze coloranti eco-compatibili.



**ISO 14001:2004
Conforme ai sistemi di gestione ambientale**

*La disponibilità del programma varia a seconda del paese e del portfolio prodotti. Per tutti i dettagli e la disponibilità, consultare i rappresentanti di zona.

Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, SV2. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.



162511T

OTHMED-BRO-60_162511T

DLS 03/2018

2017-16251