

Conquest

Arthroscopic instruments

コンクエスト関節鏡手術器械



Conquest

コンクエスト関節鏡手術器械

コンクエストは関節鏡視下手術のさまざまな症例に対応します。

先端加工に新しい製造技術を導入

高精密切断加工に用いられる新しいワイヤ放電加工技術を導入することにより、噛み合わせ部などの先端の精度を高め、切れ味・把持力に寄与しました。

強化されたシャフト部

シャフト部は折損・彎曲を防止するために、テフロンコーティングで強化しています。また、クロムメッキ処理によって滑らかな挿入と動きを提供します。

ロープロファイルチップ

半月板後方などタイトな部位にでも適切なアプローチが容易にできるロープロファイル先端。

スロープチップ (傾斜先)

後部組織の切除やリフティングに有効。

Meniscal Crescent デザイン

半月板切除用に考案されたユニークな形状で、アプローチが困難な半月板後部でも半月板の輪郭に沿った切除が容易。

豊富なサイズとバリエーション



2.7mm/3.4mm シャフト

2.0mm シャフト

パンチ*1

コンクエストパンチは、多種多様な形状の先端部を揃え、様々なニーズに対応できるように考慮しました。これらのパンチは、スムーズに組織を引くことができる歯を有し、より安全かつ正確な切除に貢献します。

ビッグバスケット鉗子
ストレート



OR-0300-034-100 3.4mm
OR-0300-027-100 2.7mm

ビッグバスケット鉗子
30°右カーブ



OR-0300-034-101 3.4mm
OR-0300-027-101 2.7mm

ビッグバスケット鉗子
30°左カーブ



OR-0300-034-102 3.4mm
OR-0300-027-102 2.7mm

ビッグバスケット鉗子
15°上向き



OR-0300-034-103 3.4mm
OR-0300-027-103 2.7mm

パンチ鉗子
上向きシャフト



OR-0300-034-104 3.4mm
OR-0300-027-104 2.7mm

ナローバスケットパンチ
ストレート



OR-0300-034-200 3.4mm
OR-0300-027-200 2.7mm

ナローバスケットパンチ
先端 15°上向き



OR-0300-034-203 3.4mm

ナローバスケットパンチ
先端 45°アングル



OR-0300-034-110 右 3.4mm
OR-0300-034-111 左 3.4mm

パンチ鉗子スクープ型
ストレート



OR-0300-034-300 3.4mm

パンチ鉗子スクープ型 30°



OR-0300-034-301 右 3.4mm
OR-0300-034-302 左 3.4mm

メニスカルクレセント
パンチ アングル



OR-0300-034-500 右 3.4mm
OR-0300-034-501 左 3.4mm

メニスカルクレセント
パンチ 30°カーブ



0300-034-502 右 3.4mm
0300-034-503 左 3.4mm

ロータリーパンチ鉗子 90°



OR-0300-034-400 右 3.4mm
OR-0300-034-401 左 3.4mm

バックバイター



0300-034-800 3.4mm

剪刀*1

コンクエスト剪刀は、滑らかなノーズを備えているため、関節への進入、目的部位への到達をより適切に行うことができます。

フック型剪刀



OR-0300-034-600 3.4mm

フック型剪刀先端 30°アングル



0300-034-601 右 3.4mm
0300-034-602 左 3.4mm

マイクロ剪刀パンチ



OR-0300-034-603 3.4mm
OR-0300-027-603 2.7mm

把持鉗子*1

コンクエスト把持鉗子は、膝または肩関節のより多くの部位にアクセスできるデザインと、組織および遊離体をしっかりと把持する性能を備えています。

把持鉗子ストレート



0300-034-700 3.4mmmm ラチェット付
OR-0300-034-701 3.4mm

軟組織用把持鉗子ストレート



0300-034-390 4.0mm
OR-0300-034-702 3.4mmmm ラチェット付
OR-0300-027-702 2.7mmmm ラチェット付
OR-0300-034-703 3.4mmmm
OR-0300-027-703 2.7mmmm

クロー型把持鉗子ストレート



0300-034-380 3.4mm

スモールジョイント用器械*2

直径2.0mmの器具は、肘、手首、および足首関節の鏡視下手術に適しています。

バスケット鉗子ストレート



OR-242-10-200 2.0mm

切除鉗子スクープ型ストレート



OR-242-10-300 2.0mm

剪刀フック型ストレート



OR-242-10-400 2.0mm

コンクエスト滅菌ケース

0242-000-012


関節鏡鉗子用滅菌ケース 12個用

OR-242-000-024

滅菌ケース (インスツルメント 24個用)



Tip variations

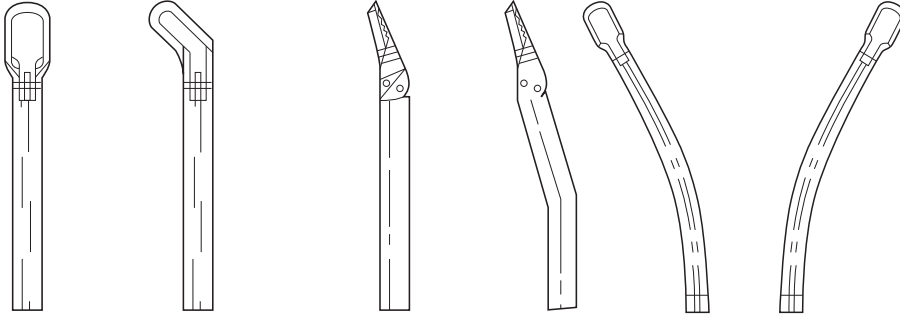

ストレート 先端45°左向/右向 向先端15°上向 アップシャフト 30°左曲 30°右曲

Features

先端部のロープロファイルデザインにより、非常に狭い部位でもより正確な位置取りを目指した設計です。

Meniscal Crescent デザインにより、半月板の輪郭に沿った切除が行えます。

90°ロータリーパンチは、半月板前方から内側3分の1の部位へのアクセスが可能です。



パンチ先端部



メニスカルクレセントパンチ



ロータリーパンチ

Craftsmanship



医療機器届出番号 販売名

- | | | |
|----|------------------|------------------|
| *1 | 13B1X10209000832 | コンクエスト関節鏡手術器械 |
| *2 | 13B1X10209000469 | ストライカー内視鏡外科手術用器具 |

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: SM1-10
YN/MI 1m 09/21

Copyright © 2021 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp