

Sonopet iQ

Ultrasonic Aspirator System

A new wave of
brilliance



Introducing Sonopet iQ[®] with Pulse Control

Custom waveforms for resection
control by tissue type¹

Leading the way to **better surgical experiences**

What's new?



Performance & Versatility


- 微細な破砕力コントロール性能：POWER 0-20%区間は1%毎に設定が可能
- 豊富なチップラインナップ：よりアグレッシブな軟組織用チップなど、豊富なラインアップをご準備
さまざまな診療科でご使用いただけます





Easy Set Up

- イリゲーション サクションカセットのコンソールへの接続がワンタッチで可能
- ハンドピース、フットスイッチ、ハンドコントローラは前面パネル下部にワンタッチ接続
- システムセットアップ手順をスクリーン表示可能、イラストナビゲーションによるセットアップガイド
- チップ自動認識機能により接続されたチップをコンソールが自動認識

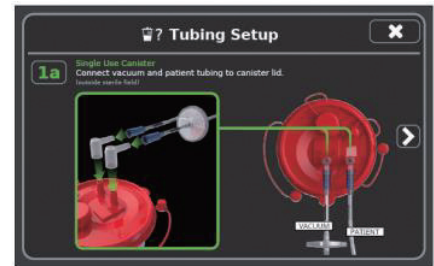


Customization

- チップ毎に設定のカスタマイズとプリセット登録が可能
ワンタッチで設定が呼び出せます



PULSE control

- iQ パルスコントロールのウェーブフォームは、Soft Tissue チップと Bone Cutting チップそれぞれに独自のアルゴリズムを設定しています。
- iQ パルスコントロールは OFF (ノーマルモード)、およびパルスコントロール 1 から 5 段階の計 6 段階での設定が可能となっております。
モードを選択することにより、組織破碎のパフォーマンスをコントロールすることが可能です。

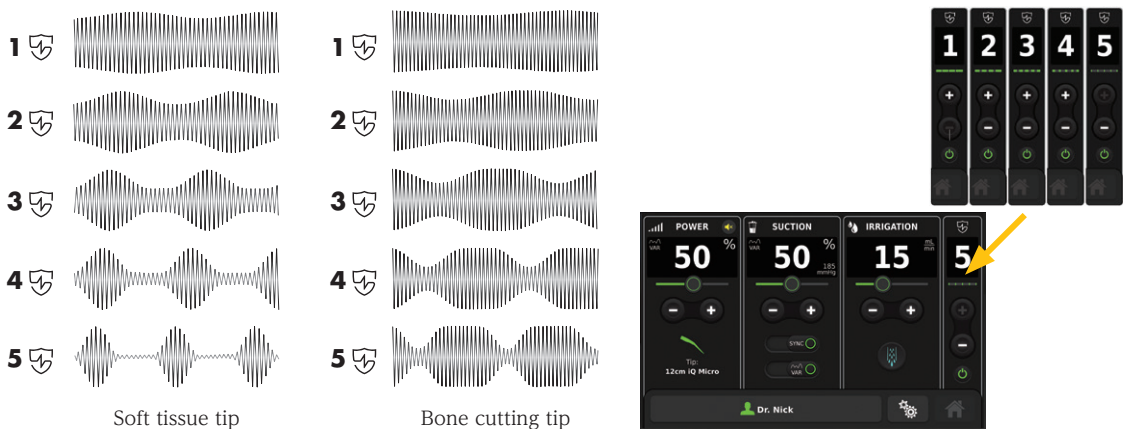

SONOPET iQ
コンソール
5500-050-000 *1



SONOPET iQ
ハンドコントローラー
5500-402-000 *1
コンソール付属品



SONOPET iQ
25kHz アングルハンドピース
5500-255-000 *1



SONOPET iQ
滅菌ケース
5500-800-278



M トルクレンチ

5450-800-039 *1



SONOPET iQ

フットスイッチ ベーシックタイプ

5500-006-000 *1



SONOPET iQ

フットスイッチ アドバンスドタイプ

5500-007-000 *1



SONOPET iQ

ワイヤレスフットスイッチ

5500-008-000 *1



SONOPET iQ

専用カート

5450-850-410



医療機器承認番号

販売名

*1 30100BZX00221000

ソノペット iQ

Soft tissue tips *1

12cm Micro チップセット

5500-25S-309
 1箱4個入 滅菌済み
 L 4.7in (120mm) OD 1.6mm ID 1.20mm



12cm Standard チップセット

5500-25S-307
 1箱4個入 滅菌済み
 L 4.5in (115mm) OD 1.92mm ID 1.5mm



12cm Large チップセット

5500-25S-308
 1箱4個入 滅菌済み
 L 4.7in (112.1mm) OD 2.49mm ID 2.0mm



20cm Standard チップセット

5500-25S-301
 1箱4個入 滅菌済み
 L 8.1in (205mm) OD 1.92mm ID 1.5mm



12cm Barracuda チップセット

5500-25S-310
 1箱4個入 滅菌済み
 L 4.5in (115mm) OD 1.92mm ID 1.5mm



12cm Serrated Large チップセット

5500-25S-316
 1箱4個入 滅菌済み
 L 4.6in (115.7mm) OD 2.51mm ID 2.0mm



L : チップ長 CL : ブレード長 CW : ブレード幅 OD : 外径 ID : 内径

Bone cutting tips *1

12cm Micro Claw チップセット

5500-25B-315
1箱4個入 滅菌済み
L 4.8in (121mm) GL 1.8mm CW 2mm



12cm Claw チップセット

5500-25B-318
1箱4個入 滅菌済み
L 4.8in (121mm) GL 1.7mm CW 2.8mm



12cm 120 Claw チップセット

5500-25B-317
1箱4個入 滅菌済み
L 4.8in (121mm) GL 2.58mm CW 3.15mm



12cm Apex 360 チップセット

5500-25B-312
1箱4個入 滅菌済み
L 4.8in (121mm) GL 2.58mm CW 3.15mm



20cm Apex 360 チップセット

5500-25B-302
1箱4個入 滅菌済み
L 7.9in (200mm) GL 2.5mm CW 3.15mm



18cm Micro Claw チップセット

5500-25B-303
1箱4個入 滅菌済み
L 7.2in (182.8mm) GL 1.6mm CW 2mm



18cm Apex Micro Claw チップセット

5500-25B-319
1箱4個入 滅菌済み
L 7.2in (182.8mm) GL 1.4mm CW 2mm



11cm Knife チップセット

5500-25B-107
1箱4個入 滅菌済み
L 4.2in (106mm) GL 12.5mm CW 0.83mm



11cm Apex Knife チップセット

5500-25B-114
1箱4個入 滅菌済み
L 4.2in (106mm) GL 12.5mm CW 0.83mm



ディスポーザブル キャニスター

5450-851-012 *3
1箱12個入 未滅菌



SONOPET iQ イリゲーション サククションカセット

5500-573-000 *2
1箱4個入 滅菌済み



SONOPET iQ 滅菌ドレープ

5500-472-000
1箱4個入 滅菌済み



医療機器承認番号

販売名

*1 30100BZX00222000 ソノペット iQ 単回使用チップセット

医療機器認証/届出番号

販売名

*2 301AFBZX00066000
*3 13B1X10209000820

ソノペット iQ イリゲーションサククションカセット
ディスポーザブル キャニスター

Sonopet iQ

Ultrasonic Aspirator System

●カタログ番号一覧

Capital		
品番	品名	規格
5500-050-000*1	SONOPET IQ コンソール	
5500-255-000*1	SONOPET IQ 25kHz アンクルハンドピース	
5450-800-039	M トルクレンチ	未滅菌 (HMF-040) 25MA用
5500-800-278	SONOPET IQ 滅菌ケース	
5500-006-000*1	SONOPET IQ フットスイッチ	ベーシックタイプ
5500-007-000*1	SONOPET IQ フットスイッチ	アドバンスドタイプ
5500-008-000*1	SONOPET IQ ワイヤレスフットスイッチ	
5500-402-000*1	SONOPET IQ ハンドコントローラー	
5450-850-410	SONOPET IQ 専用カート	

Disposables		
品番	品名	規格
Soft tissue tips*2		
5500-25S-309	SONOPET IQ 12CM MICRO チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25S-307	SONOPET IQ 12CM STANDARD チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25S-308	SONOPET IQ 12CM LARGE チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25S-301	SONOPET IQ 20CM STANDARD チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25S-310	SONOPET IQ 12CM BARRACUDA チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25S-316	SONOPET IQ 12CM SERRATED LARGE チップセット	1箱4個入 滅菌済み
Bone cutting tips*2		
5500-25B-315	SONOPET IQ 12CM MICRO CLAW チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-318	SONOPET IQ 12CM CLAW チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-317	SONOPET IQ 12CM 120 CLAW チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-312	SONOPET IQ 12CM APEX 360 チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-302	SONOPET IQ 20CM APEX 360 チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-303	SONOPET IQ 18CM MICRO CLAW チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-319	SONOPET IQ 18CM APEX MICRO CLAW チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-107	SONOPET IQ 11CM KNIFE チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-25B-114	SONOPET IQ 11CM APEX KNIFE チップセット	1箱4個入 滅菌済み
5450-851-012*4	ディスポーザブルキャニスター	1箱12個入 未滅菌
5500-573-000*3	SONOPET IQ イリゲーションサクシジョンカセット	1箱4個入 滅菌済み
5500-472-000	SONOPET IQ 滅菌ドレープ	1箱4個入 滅菌済み

●仕様・性能

発振方法	電歪振動
出力方式	連続発振
コントロール	タッチスクリーン方式
発振周波数	25kHz
最大吸引圧力	75.5kPa
イリゲーション流量	3~40mL/分
ハンドピース滅菌	オートクレーブ滅菌 (滅菌方法については取扱説明書をご参照ください)
電源	AC100~240V 50/60Hz, 6-3A
本体寸法(mm)	W:330.2×D:442.0×H:233.7mm
本体重量	18.28kg

医療機器承認/認証/届出番号 販売名

*1	30100BZX00221000	ソノベット iQ
*2	30100BZX00222000	ソノベット iQ 単回使用チップセット
*3	301AFBZX00066000	ソノベット iQ イリゲーションサクシジョンカセット
*4	13B1X10209000820	ディスポーザブル キャニスター



Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されています仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-50
HS/SE 5m 06/22

Copyright © 2022 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp