


Starke  
Leistung,

**große  
Vielseitigkeit**

Spetzler-Malis und SILVERGlide bipolare Non-Stick Pinzetten



Alle unsere bipolaren Pinzetten mit Non-Stick Effekt **wirken Gewebeanlagerungen entgegen** und sind auf **beste Visualisierung** ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie die Spetzler-Malis zum Einmalgebrauch oder die wiederverwendbare SILVERGlide bevorzugen, Sie erhalten von uns eine bipolare Pinzette, die durch **Präzision und Kontrolle** überzeugt.

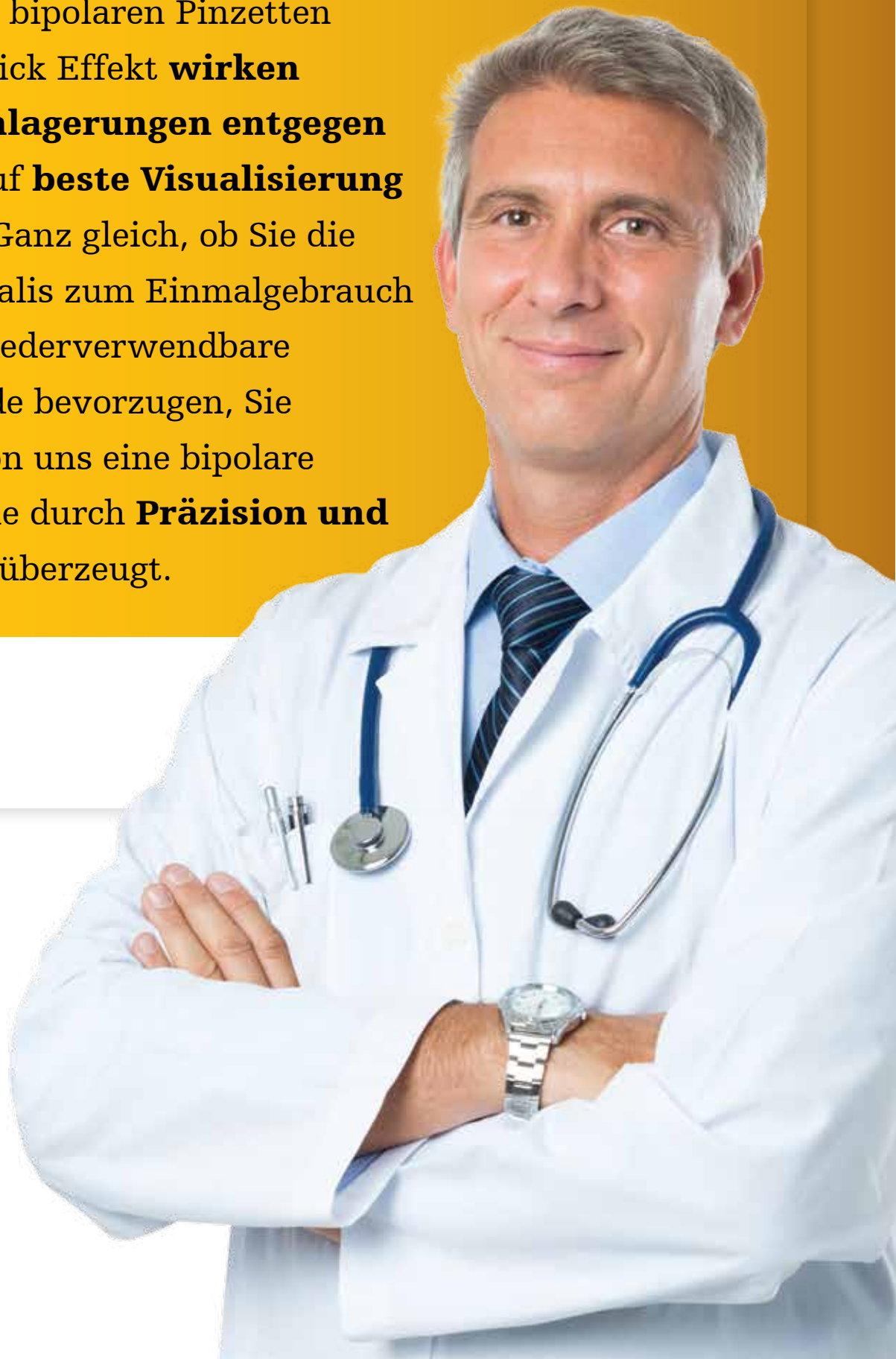

## Balance

und bessere Visualisierung mit der Spetzler-Malis bipolaren Pinzette mit Non-Stick Effekt zum Einmalgebrauch

### **Die Spetzler-Malis bipolare Pinzette zum Einmalgebrauch entfaltet ihre Vorteile immer wieder aufs Neue**

- Einwegnutzung sorgt für präzise Ausrichtung der Spitzen und wiederholbare Koagulationsleistung
- Non-Stick Technologie erhöht die Leistung
- Schlanke Bajonettkonstruktion verbessert die Visualisierung
- Flexibles, leichtes Kabel und entfernt platzierter Anschlussstecker sorgen für eine gute Balance
- Federvorspannung verstärkt die Kontrolle und das taktile Feedback
- Der dünne, transparente Schlauch der bipolaren Pinzette mit Spülfunktion schafft bessere Sichtverhältnisse
- Die zweifache Spülfunktion der bipolaren Pinzette mit Spülfunktion hält Instrumentenspitzen und Gefäße feucht



# Spetzler-Malis schlanke bipolare Pinzette **Standard** zum Einmalgebrauch


**Flexibles, leichtes Kabel  
und entfernt platzierter  
Anschlussstecker** sorgen für  
eine gute Balance

**Federvorspannung**  
verstärkt die Kontrolle  
und das taktile  
Feedback

**Non-Stick  
Technologie**  
erhöht die Leistung

**Schlanke  
Bajonettkonstruktion**  
verbessert die  
Visualisierung

**Einwegnutzung** sorgt für  
präzise Ausrichtung der  
Spitzen und wiederholbare  
Koagulationsleistung

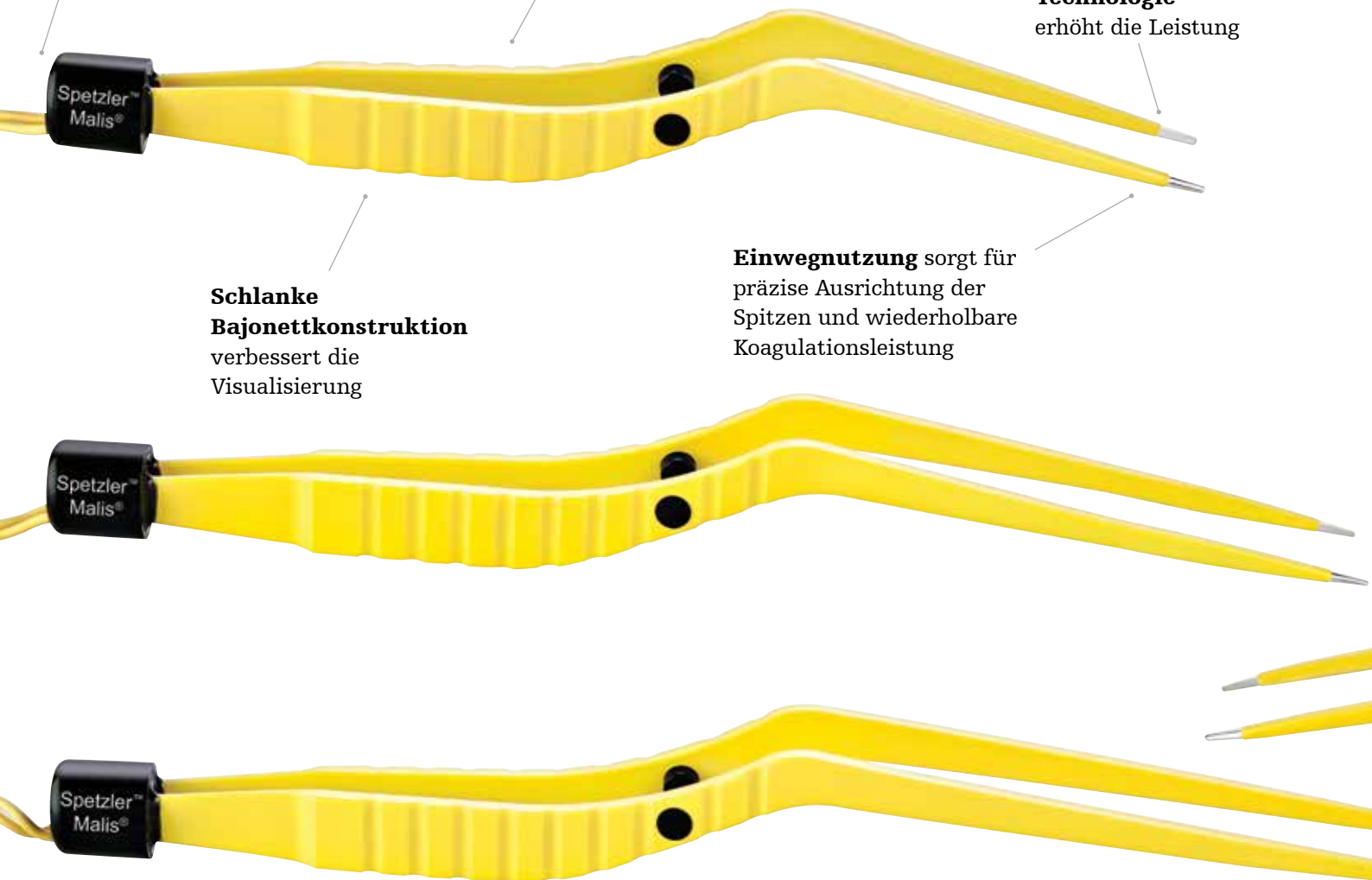

## **18 cm**

6760-180-015 1,5mm Spitze  
6760-180-010 1,0mm Spitze  
6760-180-005 0,5mm Spitze

## **20 cm**

6760-200-015 1,5mm Spitze  
6760-200-010 1,0mm Spitze  
6760-200-005 0,5mm Spitze

## **23 cm**

6760-230-015 1,5mm Spitze  
6760-230-010 1,0mm Spitze  
6760-230-005 0,5mm Spitze


# Spetzler-Malis bipolare Pinzette mit **Doppelspülfunktion** zum Einmalgebrauch

## Die zweifache Spülfunktion

hält Instrumentenspitzen  
und Gefäße feucht

## Der dünne, transparente

**Schlauch** schafft bessere  
Sichtverhältnisse

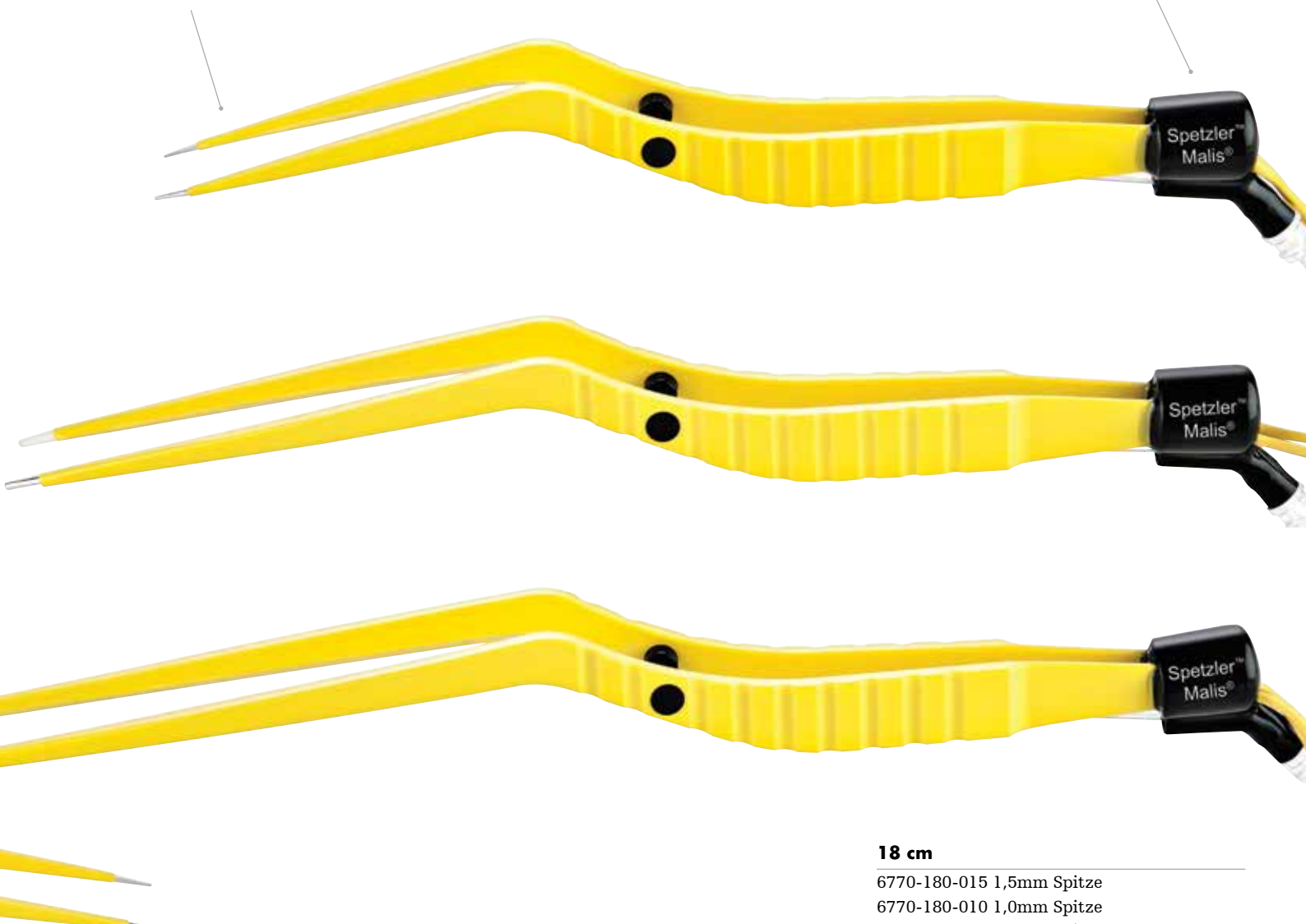

### 18 cm

6770-180-015 1,5mm Spitze  
6770-180-010 1,0mm Spitze  
6770-180-005 0,5mm Spitze

### 20 cm

6770-200-015 1,5mm Spitze  
6770-200-010 1,0mm Spitze  
6770-200-005 0,5mm Spitze

### 23 cm

6770-230-015 1,5mm Spitze  
6770-230-010 1,0mm Spitze  
6770-230-005 0,5mm Spitze

# Spetzler-Malis bipolare Pinzette **Slim** zum Einmalgebrauch



## 20 cm

6780-200-015 1,5mm Spitze  
6780-200-010 1,0mm Spitze  
6780-200-005 0,5mm Spitze

## 23 cm

6780-230-015 1,5mm Spitze  
6780-230-010 1,0mm Spitze  
6780-230-005 0,5mm Spitze

**Schlankes Profil** ermöglicht  
Zugang bei eingeschränkten  
Platzverhältnissen



# Kabel- und Spül-Sets für Spetzler-Malis bipolare Pinzette zum Einmalgebrauch

## Kabel- und Schlauchsets für Spülung mit Kreiselpumpe


6790-100-004 Integriertes Set mit Spülschlauch und bipolarem Kabel, Einmalgebrauch, modularer Stecker

## Kabel- und Schlauchsets für Schwerkraftspülung

6790-100-002 Integriertes Set mit Schlauch und bipolarem Kabel, Einmalgebrauch, modularer Stecker

## Kabelsets (ohne Schlauch)

6790-100-006 Bipolares Kabelset, Einmalgebrauch, modularer Stecker




**Die Spetzler-Malis  
bipolare Pinzette zum  
Einmalgebrauch entfaltet  
ihre Vorteile immer wieder  
aufs Neue**

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

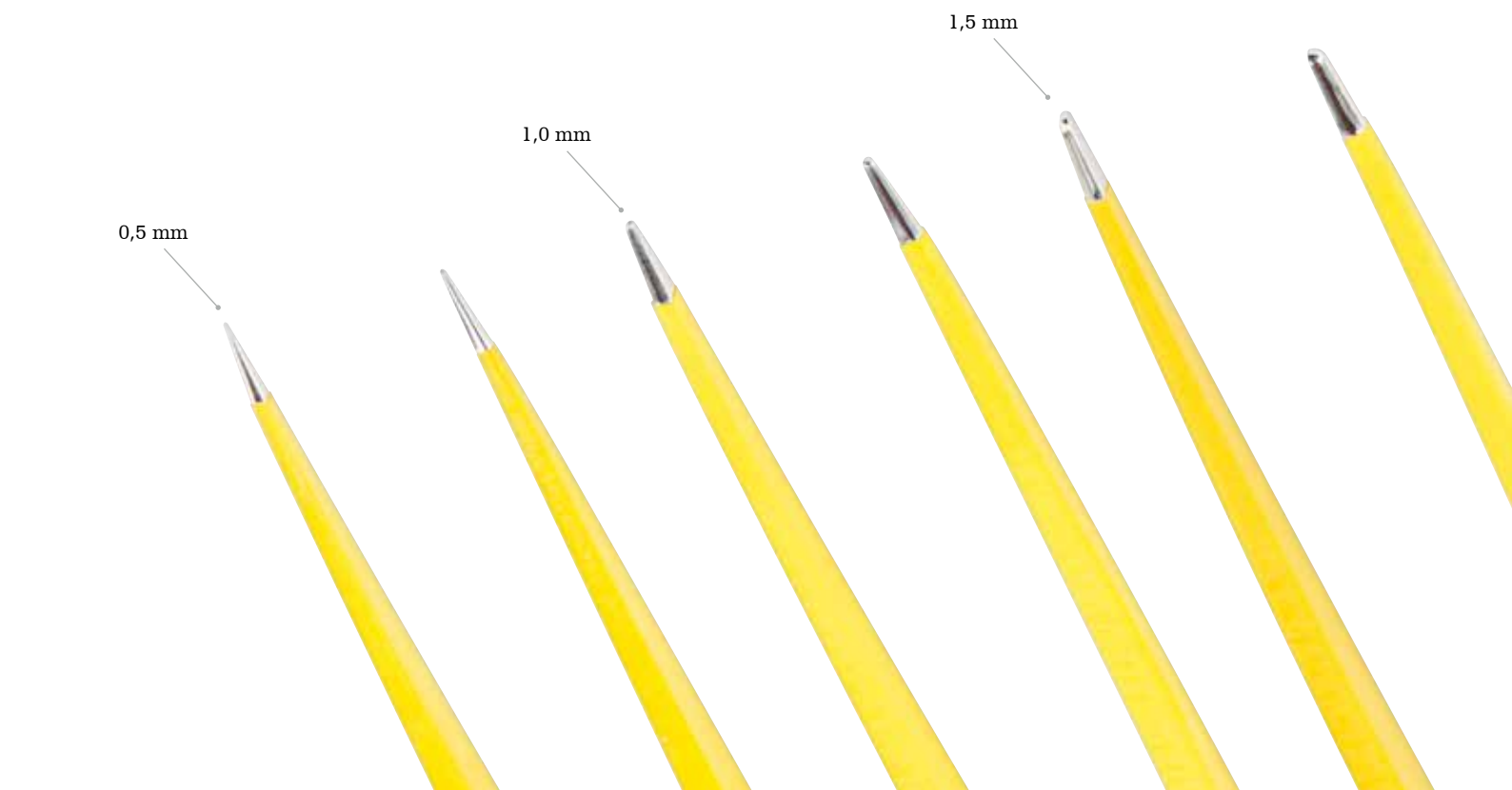

# SILVERGlide bipolare Pinzette **ProSeries** mit Non-Stick Effekt

## 14,5 cm Bajonett

6730-145-015 1,5 mm  
6730-145-012 1,2 mm  
6730-145-010 1,0 mm  
6730-145-007 0,7 mm  
6730-145-004 0,4 mm

## 16 cm Bajonett

6730-160-012 1,2 mm  
6730-160-010 1,0 mm  
6730-160-007 0,7 mm  
6730-160-004 0,4 mm  
6730-160-504, 45° nach oben 0,4 mm

## 19 cm Bajonett

6730-190-020 2,0 mm  
6730-190-015 1,5 mm  
6730-190-012 1,2 mm  
6730-190-010 1,0 mm  
6730-190-007 0,7 mm  
6730-190-004 0,4 mm  
6730-190-512, 45° nach oben 1,2 mm  
6730-190-612, 45° nach unten 1,2 mm  
6730-190-504, 45° nach oben 0,4 mm

## 22 cm Bajonett

6730-220-020 2,0 mm  
6730-220-015 1,5 mm  
6730-220-012 1,2 mm  
6730-220-007 0,7 mm  
6730-220-004 0,4 mm  
6730-220-512, 45° nach oben 1,2 mm  
6730-220-612, 45° nach unten 1,2 mm  
6730-220-507, 45° nach oben 0,7 mm  
6730-220-607, 45° nach unten 0,7 mm  
6730-220-307, 30° nach oben 0,7 mm  
6730-220-107, 15° nach oben 0,7 mm

## 24 cm Bajonett

6730-240-020 2,0 mm  
6730-240-015 1,5 mm  
6730-240-012 1,2 mm  
6730-240-007 0,7 mm  
6730-240-004 0,4 mm  
6730-240-807, 80° nach oben 0,7 mm  
6730-240-907, 80° nach unten 0,7 mm  
6730-240-507, 45° nach oben 0,7 mm  
6730-240-607, 45° nach unten 0,7 mm

## 28 cm Bajonett

6730-280-015 1,5 mm  
6730-280-012 1,2 mm

## 19 cm Bajonett, gerade

6735-190-010 1,0 mm  
6735-190-007 0,7 mm  
6735-190-320, 30° nach oben 2,0 mm  
6735-190-310, 30° nach oben 1,0 mm

**Silberbeschichtung** reduziert Kollateralerwärmung, „Hot Spots“ und Haftung für mehr Effizienz

**Ultradünne Schenkel** ermöglichen besseren operativen Zugang





## Bessere Sicht durch schlanke Konstruktion

**Zweipoliger Standard-  
Rundstecker** ist mit einer  
großen Auswahl an bipolaren  
Elektrochirurgie-Kabeln und  
-Generatoren kompatibel

**Leichter Griff**  
sorgt für einfachere  
Handhabung und  
mehr Balance


**Führungsanschlag**  
verringert  
Scherenbewegungen und  
verbessert die Kontrolle

## Was macht SILVERGlide besonders?


Weil sich kein Gewebe anlagert, können Sie ohne Unterbrechungen arbeiten. Die Non-Stick Eigenschaften zeigen auch nach vielen Anwendungen noch ihre Vorteile. Die Temperaturleitfähigkeit der SILVERGlide Legierung ist 37-mal höher als die von Edelstahl, der üblicherweise bei Pinzetten verwendet wird.

### Standardpinzette aus Edelstahl

Bei der Koagulation treten durch Funken verursachte „Hot Spots“ auf.

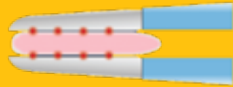

Die „Hot Spots“ führen zum lokalen Anhaften von Gewebe.

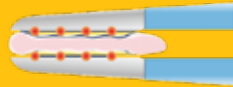


Das an den Pinzettenspitzen haftende versengte Gewebe wird abgerissen.




### SILVERGlide Non-Stick Effekt

Bei der Koagulation treten „Hot Spots“ auf.

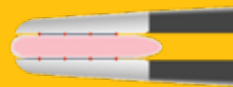

Die Wärme wird schnell abgeleitet, um ein Anhaften von Gewebe zu vermeiden.

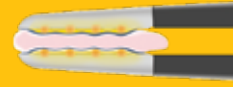

Die Pinzette kann zurückgezogen werden, ohne dass Gewebe an ihr haften bleibt.




**Handgriff:** geringes Gewicht, leicht zu greifen und zu bedienen

**Führungsanschlag:** verringert Scherenbewegungen und verbessert die Kontrolle

**Schenkel:** Ultradünne Schenkel ermöglichen besseren operativen Zugang.

**Spitzen:** Silberbeschichtung unterstützt schnelle Wärmeableitung, sodass es zu weniger Kollateralerwärmung und Hot Spots kommt, die zum Anhaften von Gewebe führen.

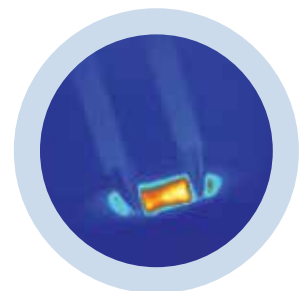

# Malis bipolarer Generator und Spülsystem



## Spüleinheit

Optionale integrierte Spüleinheit



## Extragroßer Farbbildschirm für einen schnellen Überblick



**DUAL WAVE Technologie** bietet Sicherheit beim Schneiden und Koagulieren

**Programmierbares Benutzerprofil** speichert Informationen für bis zu acht Chirurgen

**CUT- und COAG-Drehregler** ermöglichen schnelle Anpassung der Einstellungen

**Unabhängige bipolare Ausgänge** verbessern die Funktionalität

## Malis bipolarer Generator und Spülsystem

- 6700-313-500 Malis bipolarer Generator (mit Fußpedal und Netzkabel)
- 6700-313-600 Malis bipolare Spüleinheit (ohne Netzkabel)
- 6700-100-001 Netzkabel für bipolare Spüleinheit
- 6700-313-004 Verbindungskabel für bipolaren Generator/bipolare Spüleinheit
- 6700-313-002 Doppel-Fußpedal Schneiden/Koagulieren für bipolaren Generator
- 6700-313-700 Wagen für bipolaren Generator

## Weiteres Zubehör

- 6700-313-003 Einzelfußpedal
- 6700-313-304 Adapterkabel für Einzelfußpedal



Ganz gleich, ob Sie sich für die wiederverwendbare Variante oder die Variante zum Einmalgebrauch entscheiden, erhalten Sie mit unserer bipolaren Pinzette mit Non-Stick Effekt eine spezialisierte Verlängerung für Ihre Hände und Augen.

## NSE

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt Personen aus medizinischen Fachkreisen eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss die medizinische Fachkraft stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Malis, SILVERGlide, Spetzler-Malis und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union CE-zertifiziert.



9100004379DE Rev. A  
DFS 09/2017  
2017-13266

Copyright © 2021 Stryker

[www.stryker.com](http://www.stryker.com)



Stryker Instruments  
4100 East Milham Avenue  
Kalamazoo, MI 49001 USA  
t: (+1) 269 323 7700  
f: (+1) 800 999 3811  
[stryker.com](http://stryker.com)

